




## Instrumenten-Hubtische Serie T-70

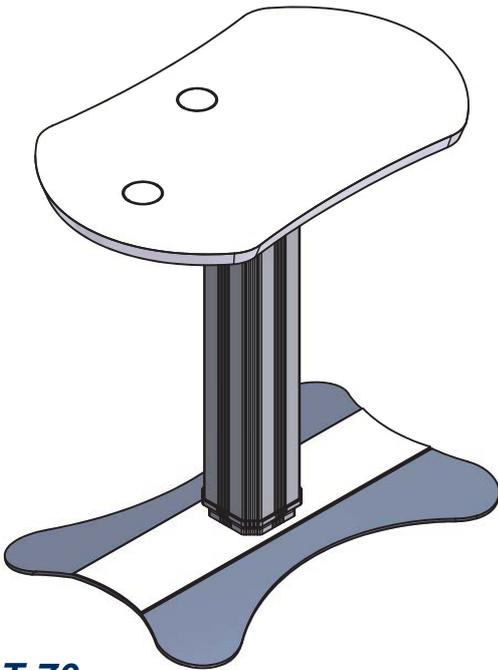


**T-70**  
mit symmetrischer Tischplatte  
für 1 Großgerät

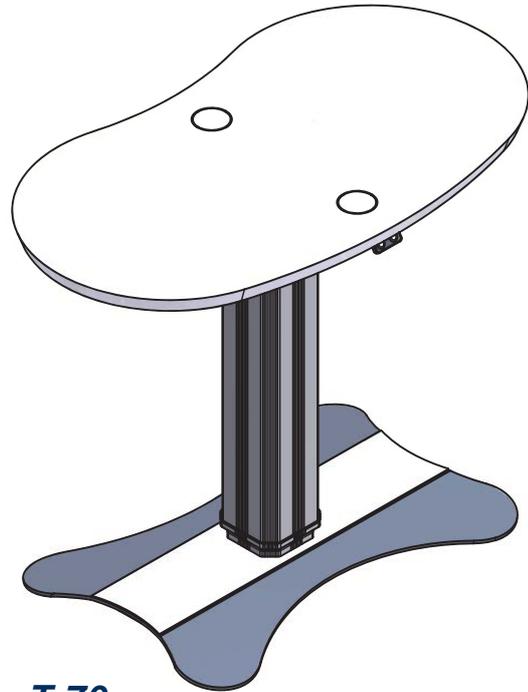

**T-70**  
mit symmetrischer Tischplatte  
für 2 Großgeräte

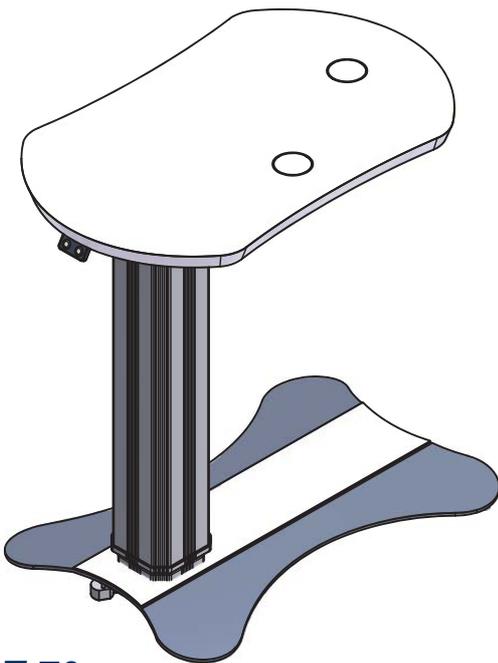

**T-70**  
mit asymmetrischer Tischplatte  
für 1 Großgerät

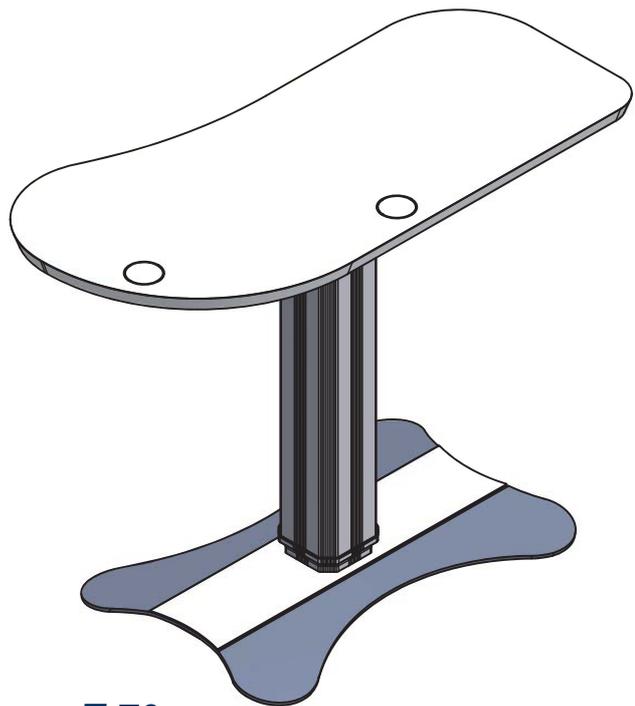

**T-70**  
mit symmetrischer Tischplatte  
für 1 Gerät plus **iMac** Computer,  
ideal für die Funduskamera **Cobra**  
oder die Scheimpflug-Kamera **Sirius**

## Instrumenten-Hubtische Serie T-70

Das frische Farbdesign der Tischserie T-70 fügt sich perfekt in jede Einrichtung ein:

Tischfuß: RAL 7024 Graphitgrau  
Tischplatte: RAL 9003 Signalweiß  
Profilblenden und Säulenflansch: RAL 9007 Graualuminium

Die ansprechend geformten Tischplatten erhalten Sie in verschiedenen Abmessungen, jeweils passend **für Ihren Bedarf**. - Egal ob für ein oder zwei Geräte, mit oder ohne Computer.

Die motorische Hubsäule arbeitet sehr **leise** und zuverlässig. Sie ist je nach Anforderung zentral oder asymmetrisch angeordnet.  
Ihre enorme **Hubkraft** entspricht einem Gewicht von fast **150 kg**.

Das moderne Konzept des T-70 bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu zwei praktische **Kabeldurchführungen** sehr leicht nachzurüsten. Die Unterseite der Tischplatte besitzt dafür bereits vorgefertigte Fräsungen. So verschwinden alle lästigen Strom- und Datenkabel **ganz elegant** direkt neben dem Gerät.

Schuko-**Steckdosen** zur Stromversorgung Ihrer Geräte befinden sich direkt unterhalb der Tischplatte.

Gebremste **Möbelrollen** sind optional als Zubehör erhältlich.

### Technische Daten

Höhe: 72 cm bis 115 cm  
Hub: 43 cm  
Hubkraft: 1500 N (ca. 150 kg)  
Netzspannung: 230 V / 50 Hz  
Stromaufnahme: 450W / max 2,0A

